



PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE

ميزان أطفال إلكتروني



BBP01

Pour usage domestique, interdit pour usage médical.

للاستخدام المنزلي، ممنوع للاستخدام الطبي

Manuel d'utilisation
الدليل الإرشادي لتعليمات التشغيل

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	3
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	5
CONFORMITE NORMATIVE.....	6
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	7
AVANT LA PREMIERE UTILISATION	7
UTILISER L'APPAREIL.....	8
Mise en place des piles	8
Fonctionnement du pèse-bébé	8
Fonction TARE automatique.....	8
Message d'erreur sur l'écran LCD.....	9
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	9
ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT	9
INFORMATION TECHNIQUE	10
GARANTIE	10

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Lire impérativement ce mode d'emploi et le conserver afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Dans le cas où vous cédez cet appareil à un tiers n'oubliez pas de fournir ce mode d'emploi avec l'appareil.
- Ce produit est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (médical, professionnel, commercial, etc.) est exclu.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - les coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambres d'hôtes.
- Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévu, par exemple une utilisation commerciale, est interdite. Une utilisation non conforme au mode d'emploi dégraderait la marque de toute responsabilité et entraînerait la perte de la garantie.
- Après avoir déballé votre appareil, assurez-vous d'abord qu'il n'a pas été abîmé. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents, s'il fuit ou présente des anomalies de fonctionnement. En cas de doute, n'utilisez pas votre appareil, et consultez le centre de service agréé ou un technicien qualifié pour le faire examiner ou réparer, ou effectuer un réglage électrique ou mécanique.
- Enlevez bien tous les éléments de l'emballage, et ne laissez pas les éléments tels que les sacs plastiques, du

polystyrène ou des élastiques à portée des enfants. Ces éléments pourraient être dangereux pour eux.

- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie. L'appareil doit être utilisé uniquement avec la base et les accessoires fournies.
- L'appareil doit être utilisé et reposé sur une surface plane et stable.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Gardez cet appareil à l'intérieur et dans un endroit sec.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'entrez pas d'objets sur le pèse-bébé.
- Pour éviter tout risque de blessure, ne montez pas sur les bords du plateau.
- Pour éviter de glisser, assurez-vous que le plateau soit sec avant de placer le bébé sur le pèse-bébé.
- Ne démontez pas le pèse-bébé.
- Evitez les vibrations ou chocs importants, tels que laisser tomber l'appareil sur le sol.
- Placez toujours votre pèse-bébé sur une surface dure et plane. Evitez tapis et moquettes.
- N'utilisez pas le pèse-bébé sur une surface glissante ou sur un sol humide.
- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur (radiateurs, etc.) afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
- Ne rangez pas l'appareil en position verticale.

- Nettoyez le plateau avec un chiffon sec. N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- L'appareil ne doit pas être immergé.
- Ce produit peut casser en cas de chute.
- En ce qui concerne les instructions d'utilisation de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice « Utiliser l'appareil ».
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice « Nettoyage et entretien ».
- Présentez l'appareil à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



La directive européenne sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le dans un centre de collecte agréé afin qu'il puisse être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

RECYCLAGE DES PILES



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rappez-les dans votre magasin.

Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu. Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Ne les incinerez pas.

Utilisez uniquement le type de piles spécifié dans cette notice. Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite. Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.


CONFORMITE NORMATIVE

L'appareil répond aux principales exigences des Directives Européennes :

2014/30/UE (Compatibilité Electromagnétique), 2011/65/UE (Limitation d'utilisation de certaines substances dans les équipements électroniques).

Cette notice est aussi présente sur le site : www.iwaco.ma

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

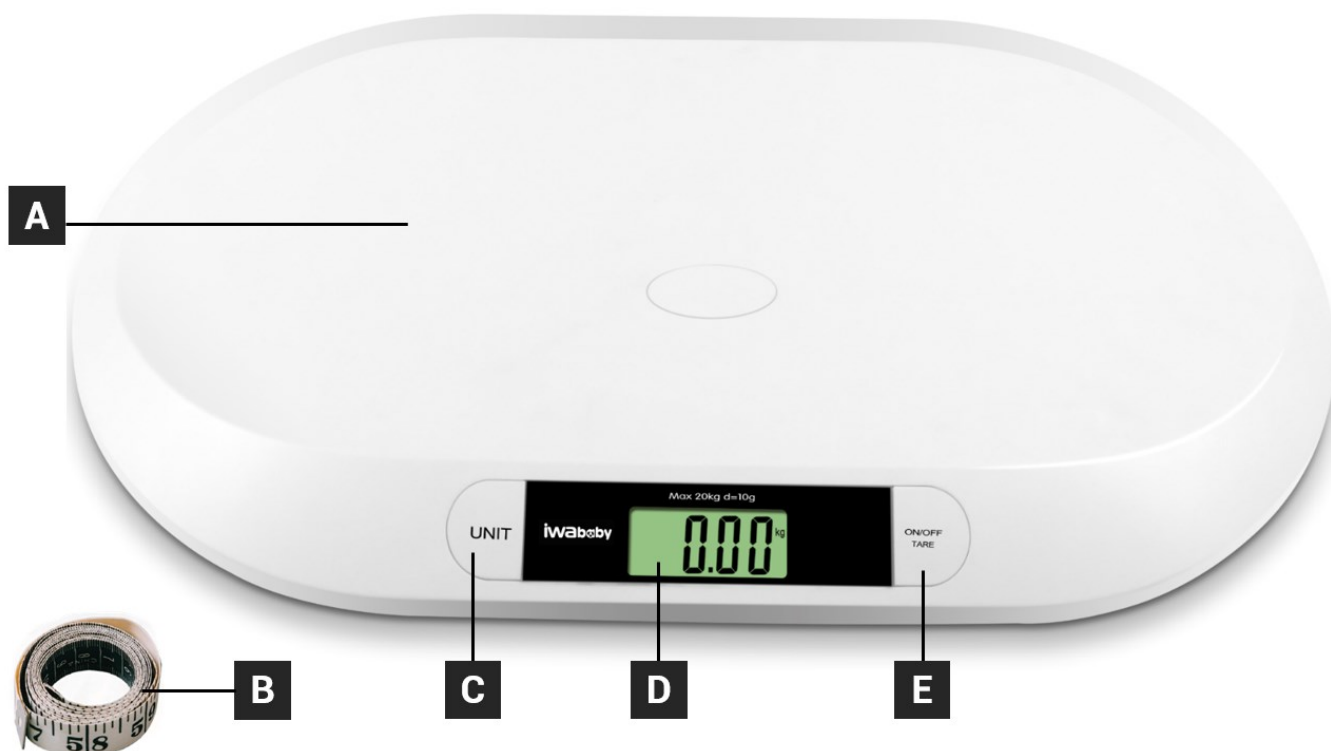


- A. Plateau pour pesage
- B. Mètre ruban
- C. Bouton « UNIT » pour sélectionner l'unité de mesure d'affichage : Kilogramme (kg), Stone (st) ou Livre (lb)
- D. Large écran LCD
- E. Bouton double fonction :
 - * « ON/OFF » ; fonction mise en marche et arrêt de l'appareil
 - * « TARE » ; fonction tare automatique excluant le poids de tout objet mis sur le pèse-bébé

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1. Retirez tous les emballages et vérifiez que l'appareil est en bon état.
2. Retirez les éventuel(le)s étiquettes et adhésifs de l'appareil.
3. Nettoyez la surface extérieure de l'appareil avec un chiffon doux.

UTILISER L'APPAREIL

Mise en place des piles

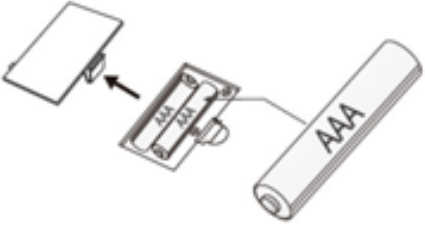	L'appareil fonctionne avec 2 piles 1.5V AAA (type LR03), non fourni. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles. Insérez les 2 piles 1,5 V dans le compartiment prévu à cet effet situé sous le pèse- bébé. Respectez les polarités +/-. Refermez le couvercle du compartiment à piles. Évitez de court-circuiter les piles et ne les jetez pas au feu. Retirez-les lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une durée prolongée.
---	--

Fonctionnement du pèse-bébé

1. Placez le pèse-bébé sur une surface plane et stable.
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Tare (ON/OFF – TARE), l'écran affiche « Hi » pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur le bouton « UNIT » pour sélectionner l'unité de mesure à afficher : Kilogramme (kg), Stone (st) ou Livre (lb).
4. Lorsque l'écran affiche « 0.00 kg », placez délicatement votre bébé sur le plateau de pesage. Si votre bébé ne bouge pas, son poids se stabilise automatiquement au bout de quelques secondes et s'affiche sur l'écran. La mesure du poids de votre bébé est bloquée sur l'écran lorsque la mesure du poids clignote 3 fois sur l'écran.
Si votre bébé bouge, son poids ne sera pas stabilisé et l'écran affiche différents poids.
5. A la fin de votre pesage, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Tare (ON/OFF/TARE) pour éteindre l'appareil. S'il n'est pas utilisé, le pèse bébé s'éteint automatiquement au bout d'environ 30 secondes.

Attention la portée maximale du pèse-bébé est de 20 kg.

Fonction TARE automatique

La fonction tare automatique vous permet par exemple de peser votre bébé confortablement installé sur une serviette sans en inclure le poids de la serviette.

- Allumez la balance en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt/Tare (ON/OFF/TARE).
- Placez la serviette sur le plateau de pesage.
- Appuyez de nouveau sur le bouton Marche/Arrêt/Tare (ON/OFF/TARE), l'écran affiche « TARE » pendant quelques secondes puis « 0.00 kg ».
- Installez votre bébé bien confortablement sur la serviette. Le poids du bébé seul s'affiche. (Lorsque vous retirez votre bébé et sa serviette, un poids négatif pourra apparaître, il s'agit du poids de la serviette correspondant en négatif)

Attention la portée maximale de la fonction TARE est de 5 kg.

Message d'erreur sur l'écran LCD

Message sur l'écran LCD	Indication
Lo	Batterie faible - Remplacer les piles
O-Ld	Surcharge. Le poids du bébé excède 20 kg.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Nettoyez la surface de votre pèse-bébé à l'aide d'un chiffon doux et propre légèrement humidifié, sans faire pénétrer d'eau dans l'appareil.
2. Rangez l'appareil dans un endroit sec.
3. Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

Anomalies	Causes	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	• L'appareil n'est pas allumé. • Piles usées	• Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Tare (ON/OFF/TARE). • Changez les piles usées par de nouvelles piles.
L'écran affiche « Lo ».	• Batterie faible	• Remplacez les piles.
L'écran affiche « O-Ld ».	• Surcharge, le poids du bébé excède 20 kg.	• Retirez immédiatement votre enfant du pèse-bébé pour éviter d'endommager l'appareil..

INFORMATION TECHNIQUE

Modèle	BBM05
Portée maximale de pesage	20 kg
Portée minimale de pesage	10 g
Graduation	10 g
Température de fonctionnement	10°C à 40°C
Humidité environnementale pour un bon fonctionnement	<80 % H.R.
Alimentation	2 piles 1.5V AAA de type LR03 (non fournies)
Fonction blocage de la mesure	Oui
Changement d'unité de mesures	Oui, choix entre kg, lb ou st
Fonction Tare automatique	Oui

GARANTIE

La garantie du produit ne couvre pas toutes utilisations non-conformes au produit telle que :

- une installation non-conforme aux dispositions légales et réglementaires (l'absence de raccordement à une prise de terre, le déplacement d'appareil entraînant une coupure du cordon d'alimentation ou du tuyau d'alimentation et d'évacuation des eaux ou encore consécutifs à des phénomènes externes tels que foudre, inondation, et plus généralement le non-respect par l'utilisateur final, l'installateur ou le revendeur des conditions de montage et de mise en service figurant dans les manuels d'utilisation des produits de la marque) ;
- un usage anormal en cas d'utilisation commerciale, professionnelle et industrielle ;
- un usage ne respectant pas les conditions prescrites dans la notice d'emploi ;
- un usage exposant le produit à des conditions extérieurs affectant le produit (pluies, humidité excessive, variation anormale de la tension électrique) ;
- la détérioration du produit due à des chocs, chutes, négligences, défauts d'entretien de l'utilisateur ;
- la transformation du produit et de ses spécifications techniques non autorisés ;
- un problème de transport du produit ;
- les craquelures sur les produits émaillés qui sont la conséquence de différences de dilatation tôle-émail ou fonte-émail et ne modifient pas l'adhérence de l'émail ;
- le bris des accessoires en verre, en matière plastique, les pièces en caoutchouc, les pièces esthétiques et d'usure ;

- une intervention effectuée directement par un usager ou une entreprise non agréée par la marque ;
- une utilisation de pièces détachées autres que des pièces détachées d'origine référencées par la marque ;

Enfin, sont également exclues de la garantie :

- la panne au déballage qui ne concerne que les défauts d'aspects pouvant provenir d'un incident de transport ou de manutention ;
- les pièces d'esthétiques ;
- les consommables ;
- les pannes afférentes aux accessoires ;
- les pannes non constatées ;
- les interventions sans changement de pièce ;
- les produits dits « de second choix » ou « reconditionnés » ;
- les pannes répétitives du fait d'un mauvais diagnostic.



La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

جدول المحتويات

13	تحذير السلامة
14	البيئة وإعادة التدوير
15	الامتثال
16	الوصف
16	قبل استخدام الآلة للمرة الأولى
17	استخدام الجهاز
17	إدخال البطاريات
17	تشغيل ميزان الأطفال
17	وظيفة الإفراغ التلقائي
18	ظهور رسالة خطأ على شاشة LCD
18	التنظيف والصيانة
18	إصلاح الأعطال
18	المعلومات التقنية
19	الضمان

تحذير السلامة

- يجب قراءة هذا الدليل والاحتفاظ به لتتمكن من الرجوع إليه فيما بعد. في حالة إعطاء هذا الجهاز لشخص آخر، لا تنس أن ترفق دليل المستخدم هذا بالجهاز.
- هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط. أي استخدام آخر (طبي، مهني، تجاري، وغيره) مستبعد.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام في التطبيقات المحلية وما شابهها مثل:
 - مناطق الطبخ المخصصة للاستخدام الشخصي في المحال، والمكاتب، والأماكن المهنية الأخرى؛
 - المزارع؛
 - استخدام عملاء الفنادق والموتيلات والبيئات الأخرى ذات الطابع السكني؛
 - الأماكن التي بها غرف استضافة
- يُحظر أي استخدام أو أي عمل بخلاف الاستخدام المقصود من هذا الجهاز، على سبيل المثال الاستخدام التجاري. أي استخدام لا يتوافق مع إرشادات الاستخدام يعفي العلامة التجارية من أي مسؤولية ويؤدي إلى الخروج من الضمان.
- بعد فتح علبة جهازك، تأكد أولاً من عدم تلفه. لا يجب استخدام الجهاز إذا سقط على الأرض، أو إذا كان به أي ضرر واضح، أو إذا كان هناك تسريب أو إذا كان به أعطال. إذا كنت في حالة شك، فلا تستخدم جهازك، واستشر مركز الخدمة المعتمد أو فنياً مؤهلاً لفحصه أو لإصلاحه، أو للقيام بإصلاحه كهربائياً أو ميكانيكياً.
- قم بإزالة جميع العناصر من العبوة، ولا تترك أشياء مثل الأكياس البلاستيكية أو البوليسترين أو الأربطة المرنة في متناول الأطفال. قد تكون هذه العناصر خطرة عليهم.
- لا تستخدم أبداً ملحقات أو أجزاء من الشركات المصنّعة الأخرى. سيؤدي استخدام هذا النوع من الملحقات أو الأجزاء إلى إلغاء الضمان. يجب استخدام الجهاز فقط مع القاعدة والملحقات المرفقة.
- يجب استخ يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص ذوي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية منخفضة أو خبرتهم أو معرفتهم غير كافية، شريطة أن يتم الإشراف عليهم أو أن يكونوا قد تلقوا تعليمات بشأن استخدام الجهاز بأمان وفهم المخاطر المحتملة.
- دام الجهاز ووضعه على سطح مستو وثابت.
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
- احتفظ بهذا الجهاز في علبته وفي مكان جاف.
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر.
- لا تقم بتخزين أي شيء على ميزان الأطفال.
- لتجنب خطر الإصابة، لا تقف على حواف كفة الميزان.

- لتجنب الانزلاق، تأكد من جفاف كفة الميزان قبل وضع الطفل عليه.
- لا تفكك ميزان الأطفال.
- تجنب الاهتزازات أو الصدمات القوية، مثل سقوط الجهاز على الأرض.
- ضع دائماً ميزان طفلك على سطح صلب ومستوٍ. تجنب وضعه على البساط والسجاد.
- لا تستخدم ميزان الأطفال على سطح زلق أو على أرض مبللة.
- احتفظ بالجهاز بعيداً عن مصادر الحرارة (مدفئة، إلخ) لتجنب تشوه الأجزاء البلاستيكية.
- لا تقم بتخزين الجهاز في وضع رأسي.
- نظف كفة الميزان بقطعة قماش جافة. لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر.
- قد ينكسر هذا المنتج إذا تم إسقاطه.
- فيما يتعلق بإرشادات استخدام الجهاز، يمكن مراجعة الفقرة التالية من دليل "استخدام الجهاز".
- بخصوص المعلومات التفصيلية حول كيفية تنظيف الجهاز، يمكن مراجعة الفقرة التالية من دليل "التنظيف والصيانة".
- فيما يتعلق بالمعلومات التفصيلية حول تنظيف الأسطح الملامسة للطعام، "التنظيف والصيانة".
- اصطحب الجهاز إلى مركز الخدمة ليتم فحصه وإصلاحه. لا يمكن للمستخدم إجراء أي إصلاحات.

البيئة وإعادة التدوير

تتطلب توجيهات الأمم المتحدة المتعلقة بشأن التخلص من نفايات الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية (WEEE) عدم التخلص من الغطاء القديم للمعدة الإلكترونية في مكب النفايات غير المصنفة التابع للبلدية. ينبغي تجميع الماكينات القديمة بشكل منفصل من أجل ضبط عملية استعادة المواد المستخدمة في تصنيع الآلة وإعادة تصنيعها وتقليل تأثيرها



على صحة الإنسان والبيئة. تشير علامة (X) الموجودة على صورة سلة النفايات المتحركة والمُلصقة على المنتج إلى أنه عند التخلص من المنتج ينبغي التخلص منه في مكان منفصل. يتعين على المستهلكين التواصل مع السلطات المحلية أو بائع التجزئة للحصول على المزيد من المعلومات بشأن الطريقة الصحيحة والسليمة للتخلص من الماكينات القديمة.

إعادة تدوير البطاريات



لا تتخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية. لحماية البيئة، تخلص من البطاريات وفقًا للوائح المعمول بها.

قم بتسليمها إلى أقرب حاوية بطاريات أو أعدها إلى متجرك.

لا تقم بإعادة شحن البطاريات أو تفكيكها أو رميها في النار. لا تعرضها لدرجات حرارة عالية أو لأشعة الشمس المباشرة. لا تحرقها.

استخدم فقط نوع البطاريات المحدد في هذا الدليل.

استبدل البطاريات عند تلفها أو في حالة حدوث تسرب.

قم بإزالة البطاريات في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة.


الامتثال

تتوافق هذه الآلة مع اشتراطات توجيهات الاتحاد الأوروبي: UE/30/2014 (التوافق الكهرومغناطيسي) UE/65/2011 (الحد من استخدام مواد معينة في المعدات الإلكترونية).

كما يمكنك الحصول على نسخة من الدليل الإرشادي لتعليمات التشغيل من على الموقع

www.iwaco.ma الإلكتروني:

الوصف

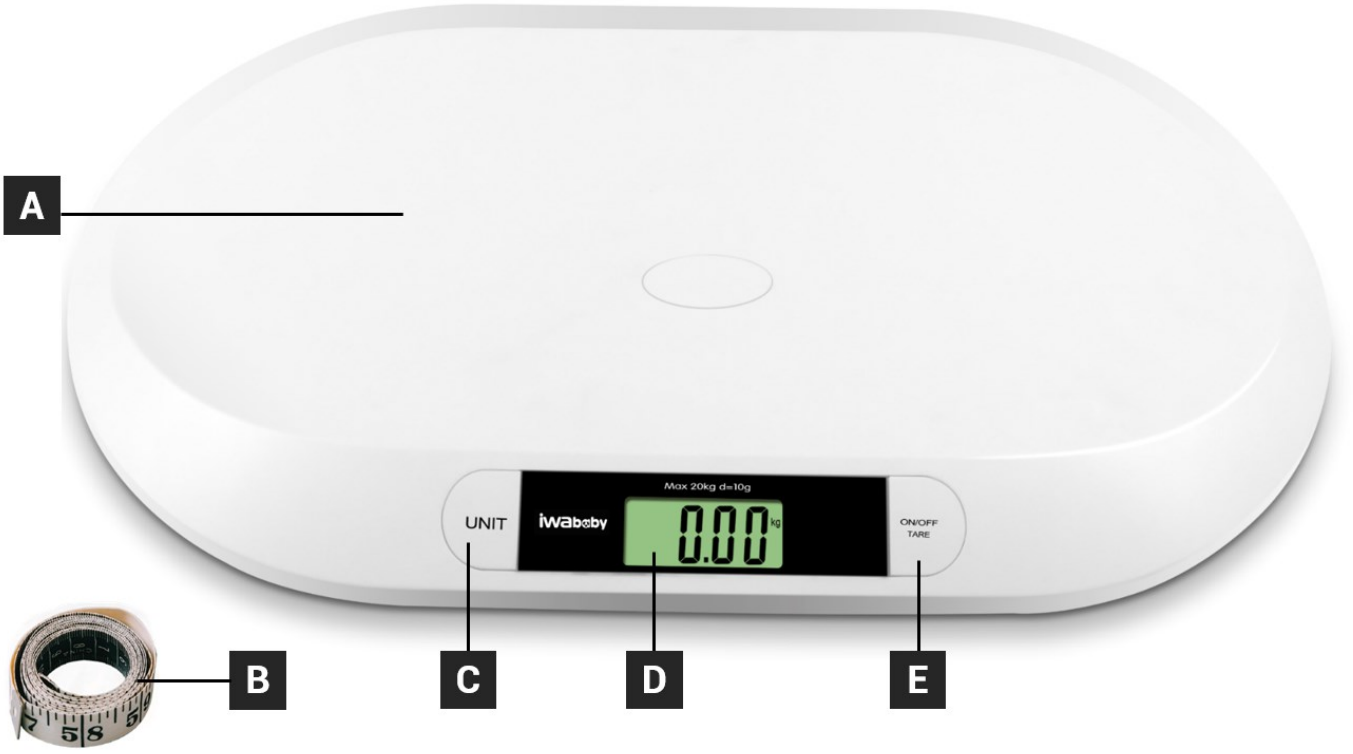

- A. كفة الميزان
- B. شريط
- C. زر "UNIT" لتحديد وحدة عرض القياس: كيلوجرام (كجم)، ستون (st) أو رطل (lb)
- D. شاشة LCD كبيرة
- E. زر وظيفة مزدوجة:
* "ON/ OFF"؛ تشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز
* "الإفراغ"؛ وظيفة الإفراغ التلقائي باستبعاد وزن أي شيء موضوع على ميزان الأطفال


قبل استخدام الآلة للمرة الأولى.

1. أزل جميع مواد التغليف وتحقق من أن الجهاز في حالة جيدة.
2. أزل الملصقات والمواد اللاصقة من الجهاز.
3. نَظِّف السطح الخارجي للجهاز بقطعة قماش مبللة.

استخدام الجهاز

إدخال البطاريات

يعمل الجهاز ببطاريتين 1.5 فولت AAA (نوع LR03) غير مرفقتين. افتح غطاء حجرة البطارية. أدخل البطاريتين بجهد 1.5 فولت في الحجرة المخصصة لهذا الغرض والموجودة أسفل ميزان الأطفال. يرجى مراعاة الاستقطاب +/-. أعد غلق غطاء حجرة البطارية.

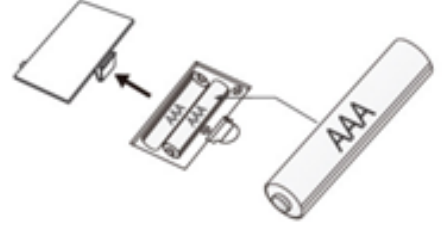

تجنب قصر دائرة البطاريات ولا تلقيها في النار. قم بإزالتها عند عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة.

تشغيل ميزان الأطفال

1. ضع ميزان الطفل على سطح صلب ومستوي.
 2. اضغط على زر التشغيل / الإيقاف / الإفرغ ((ON / OFF - TARE)، تظهر الشاشة "Hi" لبضع ثوان.
 3. اضغط على زر "UNIT" لتحديد وحدة عرض القياس: كيلوجرام (كجم)، ستون (st) أو رطل (lb).
 4. عندما تعرض الشاشة "0.00 كجم"، ضع طفلك برفق على كفة الميزان. إذا لم يتحرك طفلك، سيستقر وزنه تلقائيًا.
 - بعد بضع ثوانٍ ويظهر على الشاشة. قياس وزن طفلك سيظل عالق على الشاشة عندما يومض مقياس الوزن 3 مرات على الشاشة.
 - إذا كان طفلك يتحرك، فلن يستقر وزنه وسيظهر على الشاشة أوزان مختلفة.
 5. في نهاية عملية الوزن، اضغط على زر التشغيل / الإيقاف / الإفرغ ((ON / OFF - TARE)، لإطفاء الجهاز. إذا لم يكن قيد الاستخدام، فسيتم إيقاف تشغيل ميزان الأطفال تلقائيًا بعد حوالي 30 ثانية.
- يرجى ملاحظة أن السعة القصوى لميزان الأطفال هي 20 كجم.

وظيفة الإفرغ التلقائي

- تسمح لك وظيفة الإفرغ التلقائي، على سبيل المثال لوزن طفلك ضعه بشكل مريح على منشفة دون تضمين وزن المنشفة.
- قم بتشغيل الميزان عن طريق الضغط على زر التشغيل / الإيقاف / الإفرغ ((ON / OFF / TARE).
 - ضع المنشفة على كفة الميزان.
 - اضغط من جديد على زر التشغيل / الإيقاف / الإفرغ ((ON / OFF - TARE)، تظهر الشاشة "TARE" لبضع ثوان 0.00 kg.
 - ضع طفلك بشكل مريح على المنشفة. يتم عرض وزن الطفل وحده.
 - (عندما تحمل طفلك ومنشفته، قد يظهر وزن سلبي، وهذا هو وزن المنشفة المقابلة سالبًا)
- يرجى ملاحظة أن السعة القصوى لوظيفة الإفرغ هي 5 كجم.

ظهور رسالة خطأ على شاشة LCD

إشارة	ظهور رسالة على شاشة LCD
بطارية منخفضة - استبدل البطاريات	Lo
حمل زائد. وزن الطفل يتجاوز 20 كجم.	O-Ld

التنظيف والصيانة

1. نظف سطح الميزان الخاص بطفلك بقطعة قماش ناعمة ونظيفة ومبللة قليلاً، دون السماح للماء بالدخول إلى الجهاز.
 2. قم بتخزين الجهاز في مكان جاف.
- قم بإزالة البطاريات في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة

إصلاح الأعطال

العيوب	الأسباب	الحلول
الجهاز لا يعمل.	• الجهاز لا يضيء. • البطاريات فارغة	• اضغط على زر التشغيل / الإيقاف / الإفراغ (ON/ OFF/ TARE). • استبدل البطاريات الفارغة بأخرى جديدة.
تظهر الشاشة "Lo".	• البطارية ضعيفة	• استبدل البطاريات.
تظهر الشاشة "O-Ld".	• حمل زائد، وزن الطفل يتجاوز 20 كجم.	• احمل طفلك على الفور من على الميزان لمنع تلف الجهاز.

المعلومات التقنية

النوع	BBM05
قدرة الوزن القصوى	20 كجم
قدرة الوزن الدنيا	10 جرام
مقياس مدرج	10 جرام
درجة حرارة التشغيل	من 10 إلى 40 درجة مئوية
الرطوبة المناسبة للتشغيل السليم	درجة رطوبة أقل من 80%.
التغذية الكهربائية	بطاريتين 1.5 فولت AAA (نوع LR03) غير مرفقتين.
وظيفة حجب القياس	نعم
تغيير وحدة القياس	نعم، الاختيار بين كجم أو رطل أو ستون
وظيفة الإفراغ التلقائي	نعم

الضمان

- لا يشمل ضمان المنتج جميع حالات الاستخدام التي لا تتوافق مع هذا المنتج مثل:
- حالات التركيب التي تخالف الأحكام القانونية والتشريعية (غياب التوصيل الأرضي أو تحريك الآلة أثناء الاستخدام مما يؤدي إلى قطع كابل التوصيل بالكهرباء، أو قطع أنبوب توريد المياه أو تصريفها أو تعرضها للظواهر الخارجية مثل البرق أو الفيضانات. وبصورة عامة، عدم تقيّد المستخدم النهائي والمُثبت أو بائع التجزئة بشروط التجميع والإعداد التي تنص عليها أدلة استخدام العلامات التجارية)
 - الاستخدام الزائد عن الحدود الطبيعية في حالات الاستخدام الصناعي أو التجاري أو المهني.
 - حالات الاستخدام التي لا تتوافق مع الشروط المنصوص عليها في تعليمات الاستخدام
 - تعريض المنتج للظروف المناخية الخارجية التي تؤثر عليه (المطر، والرطوبة الزائدة، والتغيّر غير الطبيعي في الجهد الكهربائي)
 - تدهور حالة المنتج نتيجة الصدمات، وحالات السقوط والإهمال، وعيوب الصيانة من قِبَل المستخدم.
 - تغيير المنتج ومواصفاته التقنية على نحو غير المصرح به.
 - المشكلات الناتجة أثناء نقل المنتج
 - الشروخ في المنتجات المكسوة بطبقة من المينا ناتجة عن الاختلاف في درجات طلاء المينا، أو تمدّد طلاء المينا، وعدم تعديل مستوى ثبات طلاء المينا.
 - كسور القطع البلاستيكية أو الزجاجية، والأجزاء المطاطية والزخارف أو الغطاء الخارجي.
 - أي تدخل مباشر من قبل المستخدم أو أي شركة ليست مُعتمدة من قبل العلامة التجارية
 - استخدام قطع غيار خلافاً لقطع الغيار الأصلية الموصى بها من قبل العلامة التجارية.
- وفي النهاية، يُستثنى ما يلي من الضمان.
- حالات الأعطال التي تنتج عن فك الغلاف والتي تتضمن عيوباً ظاهرة قد تكون ناتجة عن حوادث النقل أو المناولة.
 - الزخارف وقطع تزيين الماكينة
 - الإكسسوارات
 - حالات التعطل في الإكسسوارات
 - المشكلات غير المُشار إليها
 - حالات التدخل دون تغيير الأجزاء:
 - المنتجات المستعملة أو المُعاد ضبطها
 - حالات الأعطال المتكررة نتيجة التشخيص الخاطئ.



يُعد هذا الضمان مُلغى في حالة إزالة اللوحة المكتوب عليها اسم المنتج أو إزالة الرقم المسلسل.

iwababy
